

**((BIRTH
ALARM))**

the original product

Birth Alarm Lite 2.0

Návod k obsluze



Děkujeme za nákup Birth Alarm Lite 2.0m. Je to extrémně spolehlivý systém pro indikaci začátku porodu. Doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod před použitím, správným sestavením a správným provozem.

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Obsah dodávky	3
3.	Příprava k použití	4
3.1	První použití	4
3.2	Zapnutí/vypnutí	5
4.	Provoz Birth Alarm Lite 2.0	6
4.1	Vložení/výměna baterií	6
4.2	Kryt Birth Alarm Lite 2.0	7
4.3	Instalace SIM karty	8
5.	Kontrolky (LED) Birth Alarm Lite 2.0	9
5.1	Kontrolky stavu	9
5.2	LTE kontrolky	10
6.	Instalace nové SIM karty	11
6.1	Volba SIM karty	11
6.2	Příprava SIM karty (obecně)	11
6.2.1	Předplacená SIM karta/předplacený kredit	11
6.2.2	Karta na smlouvu, Internet/datové karty	11
6.3	Příprav SIM karty	12
7.	Programování telefonních čísel	13
7.1	Režim programování	13
7.2	Programování telefonních čísel	13
7.2.1	Programování voláním	13
7.2.2	Programování pomocí SMS	14
7.2.3	Přímé programování	15
8.	Režim spánku	16
9.	SMS zpráva o stavu zařízení	17
10.	Tesování	18
11.	Upevnění Birth Alarmu na koně	19
11.2	Upevnění Birth Alarmu na ohlávku	20
11.3	Upevnění Birth Alarmu do ochranného rámu	20
12.	Závěr a režimy použití	21
13.	Technická data	22

1. Úvod

Když Vaše klisna rodí, chtěli byste být u toho, abyste mohli pomoci v případě potřeby nebo informovat veterináře. Koně a poníci obvykle rodí v poloze na pravém nebo levém boku. Tato poloha jim dává více prostoru během kontrakcí. Birth Alarm Lite 2.0 dobře využívá tento zvyk. Jednoduchým upevněním Birth Alarm 2.0 na spodní část ohlávky (nebo do ochranného rámu na hřbet klisny) se vám dostane upozornění, když začne porod.

2. Obsah dodávky

1. **Indikátor porodu Birth Alarm Lite 2.0** .
2. **Speciální pouzdro.** (Pouzdro, ve kterém je vložen Birth Alarm Lite 2.0.) Pouzdro lze upevnit na spodní část ohlávky nebo na hřbet klisny do ochranného rámu, který brání poškození zařízení při přetočení klisny přes hřbet.
3. **Kabelové pásky.** Abyste hned mohli začít, doplnili jsme do balení několik kabelových pásek (občas označované jako zdrčpásky). Tyto pásky jsou určeny na jedno použití, ale lze je běžně zakoupit .
4. **Speciální šroubovák.** Ten slouží k uvolnění šroubů na Birth Alarm Lite 2.0 (např. při výměně vybitých baterií nebo vyjmutí SIM karty). Na konci šroubováku je silný magnet. Ten Vám umožní ovládat Birth Alarm Lite 2.0.
5. **USB kabel.** Ten potřebujete – nebo podobný - pro aktualizaci systémového software.
6. **SIM karta - adaptér.** V této sadě naleznete několik velikostí držáků, do kterých můžete umístit vaši SIM kartu. Ne nezbytně tuto sadu využijete, ale může se hodit, když budete chtít nastavit SIM kartu ve vašem mobilním telefonu a velikost SIM karty zrovna nebude souhlasit v obou zařízeních.
7. **Dokumentace** . Obsahem jsou 2 typy dokumentů pro Birth Alarm Lite 2.0 :
 - a. **QuickStart Guide** (krátký manuál)
 - b. **Řešení závad** postup kontroly při řešení závady Birth Alarm Lite 2.0




3. Příprava k použití

3.1 První použití

Pokud chcete použít Birth Alarm Lite 2.0 poprvé, musíte provést následující kroky pouze jednou:

- Odšroubujte kryt Birth Alarm Lite 2.0 a odstraňte červenou přelepku, která je umístěna mezi kontakty jedné baterie. Všechny kontakty baterií jsou nyní spojeny a napájí energii Birth Alarm Lite 2.0.
- Vložte SIM kartu. SIM karta není součástí dodávky, ale snadno ji koupíte v nejbližším obchodě.
- V kapitole "Instalace nové SIM karty" (**viz. 6**) je vysvětleno, jak nastavit a instalovat nově zakoupenou SIM kartu.
- Jakmile jste dokončili tyto kroky u vašeho Birth Alarm Lite 2.0, můžete kryt opět uzavřít a pokračovat v nastavení. Při nasazení krytu zkontrolujte, aby světelné vodiče byly umístěny nad kontrolkami provozu (**viz. 4.2**)

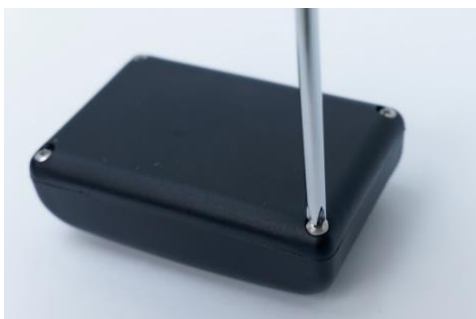

odšroubovat



odstarnění přelepky



Pokud máte dobrý příjem signálu mobilního telefonu ve stáji nebo pastvině, kde se klisna nachází, doporučujeme zakoupit SIM kartu stejného poskytovatele mobilních služeb.



V některých zemích mohou platit jistá omezení s ohledem na použití SIM karet v automatických mobilních systémech (M2M). Dotazem u vašeho poskytovatele zjistíte, zda tato omezení platí v tomto případě.

3.2 Zapnutí/vypnutí

Birth Alarm Lite 2.0 můžete zapnout /vypnout (on/off) a provozovat pomocí konce dodaného speciálního šroubováku. Na jedné z dlouhých stran krytu najdete 2 kontrolky.

Birth Alarm Lite 2.0 zapnete (**ON**) následujícím způsobem:

- Přiblížte konec speciálního šroubováku k jedné z kontrolky (je jedno ke které)
- Birth Alarm Lite 2.0 se nyní zapne. To je potvrzeno rozsvícením obou kontrolky zeleně.
- Nyní můžete konce šroubováku dát pryč.
- Váš Birth Alarm Lite 2.0 je nyní zapnutý. Kontrolky se krátce rozsvítí zeleně každých cca 5 sekund jako potvrzení, že Birth Alarm Lite 2.0 je zapnutý a funkční



Birth Alarm Lite 2.0 vypnete (**OFF**) takto:


- Přiblížte konec speciálního šroubováku k jedné z kontrolky (je jedno ke které)
- Birth Alarm Lite 2.0 se nyní vypne.
- Nyní můžete konce šroubováku dát pryč.
- Váš Birth Alarm Lite 2.0 je nyní vypnutý. Kontrolky jsou tmavé.



4 Provoz Birth Alarm Lite 2.0

Zde je uvedený přehled komponentů

1. Batterie
2. 2 LED kontrolky
3. slot pro SIM kartu
4. USB-konektor (aktualizace software)
5. LTE kontrolky
 - 5.1 "NET" – led
 - 5.2 "RING" – led
 - 5.3 "LTE" – led

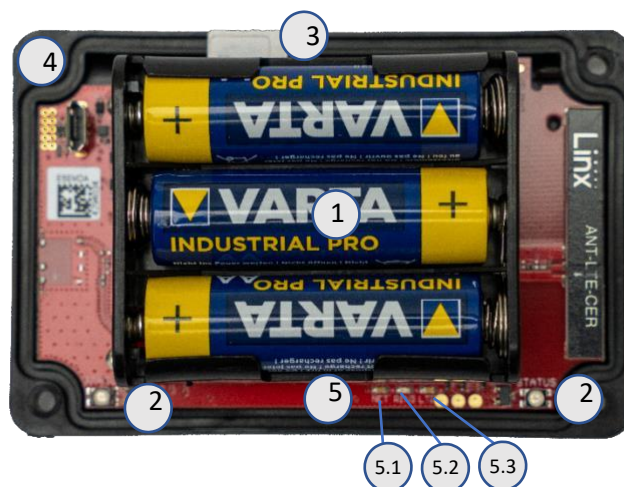

4.1 Vložení/výměna baterií

Když vyměňujete baterie v Birth Alarm Lite 2.0, měli byste vždy používat alkalické baterie (přednostně "Duracell", "Panasonic" nebo "Varta"). Používání dobíjecích baterií nedoporučujeme. Vždy vyměňte naráz všechny 3 baterie. Pokud nemůžete vyjmout baterie pouze prsty, použijte malý šroubovák, ale počínejte si opatrně.

Baterie musí být vždy vložena tak, aby negativní (-) pól byl na přítlačné pružině




Na začátku sezóny porodů vždy použijte nové baterie!



Pokud neplánujete použít Birth Alarm Lite 2.0 delší dobu, stejně jako po skončení sezóny porodů, měli byste baterie vyjmout. Je to prevence proti vytečení baterií a poškození vašeho Birth Alarm Lite 2.0 .


4.2 Kryt Birth Alarm Lite 2.0

Kryt Birth Alarm Lite 2.0 lze sešroubovat pouze jedním způsobem. Kryty kontrolky na dlouhé straně víka musí být and kontrolkami, když obě části k sobě šroubujete.

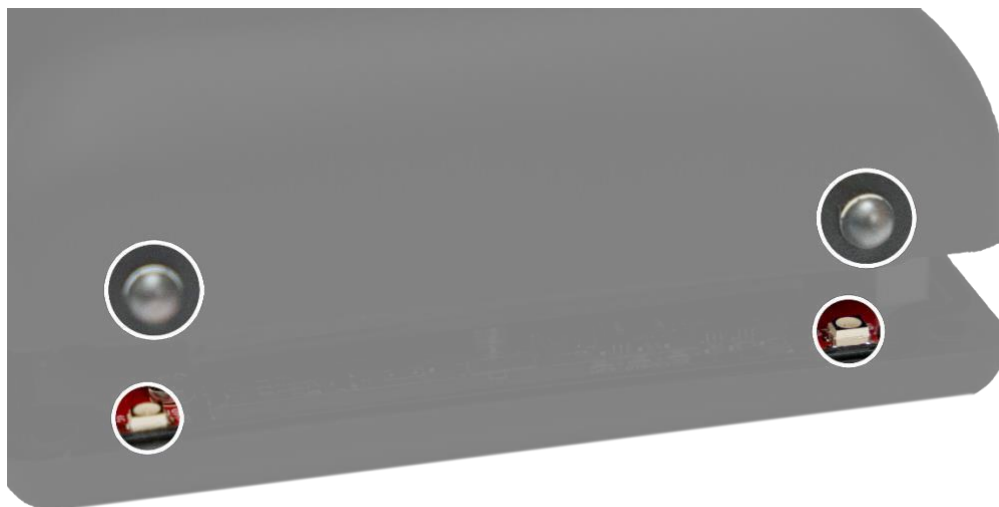


4.3 Vložení SIM karty

Birth Alarm Lite 2.0 pracuje s micro-sim. Moderní SIM karty se dodávají v lámacím rámečku, ze kterého můžete vylomit micro SIM formát. Jako micro-sim formát je obvykle považuje druhý nejmenší formát s rozměry 12 x 15 mm.

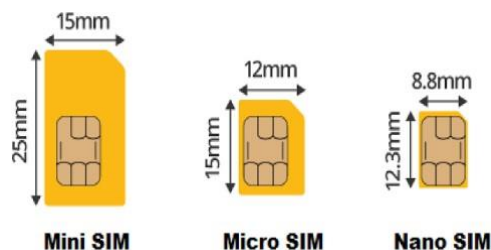

SIM karta se vkládá do Birth Alarmu čipem na dolní straně. Pozor také na seříznutý roh SIM karty. Ten musí směřovat při vkládání SIM karty směrem dopředu. Zatlačte SIM kartu do otvoru až uslyšíte "kliknutí". Potom kartu uvolněte. Nyní je SIM karta ve slotu a Birth Alarm Lite 2.0 je připraven k použití. Když chcete SIM kartu ze slotu vyjmout, lehce na kartu zatlačte, až uslyšíte další "kliknutí". Když nyní tlak uvolníte, SIM karta se posune směrem kupředu a snadno ji tak můžete vyjmout.

(více informací o SIM kartě najdete v kapitole 6)

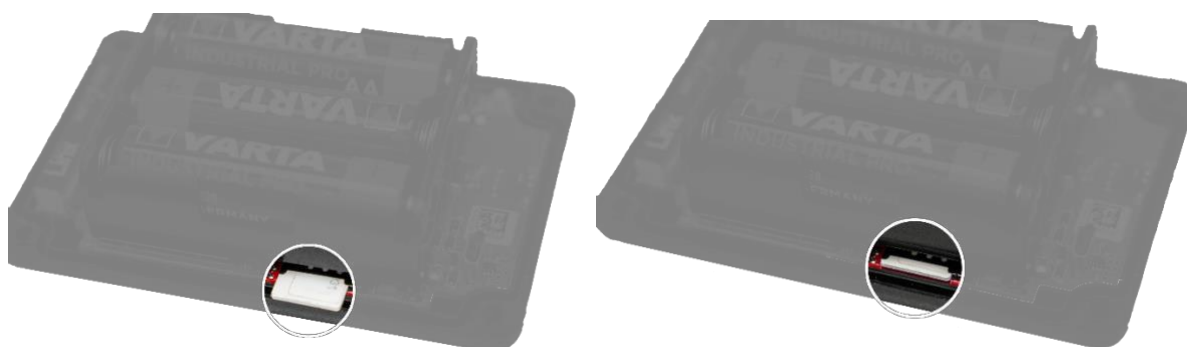

5 Birth Alarm Lite 2.0 (LED) kontrolky

Pro kontrolu funkce Birth Alarm Lite 2.0 slouží 2 provozní kontrolky a dále má Birth Alarm Lite 2.0 3 malé kontrolky uvnitř, které se ale vztahují pouze k vnitřnímu LTE modulu.

5.1 Kontrolky provozu

Kontrolky provozu jsou umístěné na dlouhé straně krytu. Tyto kontrolky pracují shodně. Dvojitá verze slouží pouze k tomu, aby byla kontrola stavu kobyly vždy přístupná z obou stran.



V tabulce jsou znázorněny možné kombinace barev, které se mohou na Birth Alarm Lite 2.0 zobrazit.





barva / varianta			Stav
●	●	●	připraven, baterie OK
●●	●●	●●	připraven, baterie OK, režim spánku zapnutý
●	●	●	připraven, slabá baterie
●	●	●	LTE/GSM aktivní, připojuje se
●●	●●	●●	LTE/GSM aktivní, nedostatečný příjem sítě
●●	●●	●●	LTE/GSM aktivní, příjem sítě průměrný
●●	●●	●●	LTE/GSM aktivní, příjem sítě dobrý

5.2 LTE kontrolky

LTE kontrolky jsou vidět pouze po otevření krytu Birth Alarm Lite 2.0 . Za běžných podmínek nepotřebujete vidět tyto kontrolky, ale může to být užitečné, když se objeví problém s připojením mobilu a je třeba kontaktovat servis.



V tabulce jsou uvedeny možné variant vzorů blikání a jejich význam:

Označení	vzor	Stav
NET		Modul se připojuje k síti
NET		Modul je k síti připojen
NET		Modul vytáčí číslo
RING		Modul přijímá volání
LTE		Modul je vypnutý

6 Instalace nové SIM karty

SIM karta není součástí dodávky. Musíte si ji zakoupit sami.

6.1 Výběr SIM karty

Kupte si předplacenou SIM kartu nebo nebo take datovou kartu nebo kartu se smlouvou u vašeho dodavatele mobilních služeb. Přednostně vybírejte operátora, o kterém víte, že v místě plánovaného použití Birth Alarm Lite 2.0 má dobré pokrytí signálem. Obvykle je předplacená karty nejjednodušším řešením. Nicméně je možné, že existují omezení pro použití SIM karty v automatickém mobilním zařízení (M2M), která zakazují použití běžných mobilních čísel. Prověřte, zda se podobné omezení uplatňuje i ve vaší zemi.



Například v Holandsku není povoleno používat předplacené karty z běžných telefonů pro automatizované systémy volání. Kontaktujte svého poskytovatele ohledně vhodného řešení nebo jděte na www.birthalarm.com.

6.2 Příprava SIM karty (všeobecně)

Když zakoupíte novou SIM kartu, musíte ji nejdříve aktivovat. To lze provést následovně:

- Vložte novou kartu do svého mobilu.
- Pokud bude telefon vyžadovat PIN po zapnutí, vložte ho. PIN je uveden na obalu SIM karty. V mnoha případech je PIN kód nastaven na "0000". **Nyní musíte deaktivovat tuto ochranu SIM karty pomocí PIN kódu. Váš telefon nesmí po zapnutí vyžadovat vložení PIN kódu u této SIM karty. Postup deaktivace najdete v návodu telefonu, kde je popsáno, jak to provést.**

6.2.1 Předplacená SIM karta a předplacený kredit na volání

Když používáte předplacenou SIM kartu, je třeba sledovat stav kreditu. Při běžném použití volání a SMS zprávy vašeho Birth Alarm Lite 2.0 jsou minimální, ale přesto pravidelně sledujte stav kreditu na předplacené SIM kartě. To zjistíte vložení této SIM karty do svého telefonu a zavoláním svému poskytovateli nebo posláním dotazovací SMS zprávy. Udržujte dostatečně vysoký kredit, aby vystačil na dostatečně dlouhé období. Dobití kreditu lze provést téměř kdekoli.

6.2.2 SIM karta se smlouvou nebo datové/internetové karty

Když máte kartu/datovou kartu se smlouvou, zkontrolujte, že poskytovatel povolil funkci na hlasové a SMS služby na této kartě. Většinou tomu tak automaticky není u datových karet.

6.3 Příprava SIM karty

Jakmile jste nastavili svou SIM kartu je třeba učinit následující kroky:

- Nejméně jednou někomu zavolejte. Poskytovatel Vám pravděpodobně zašle uvítací zprávu. Počkejte na ni a vyčkejte, zda vámi volané číslo vyzvání.
- Nyní zkontrolujte, zda je zapnuta služba hlasové schránky na této kartě. To provedete zavoláním na číslo SIM karty z jiného telefonu. Pokud jste okamžitě spojeni do hlasové schránky, potom je tato služba u této karty aktivována.
V tomto případě byste tuto službu měli zrušit.
- Obvykle můžete deaktivovat službu hlasové schránky zavoláním na linku poskytovatele nebo vložím specifického deaktivčního kódu.
Každý poskytovatel používá jiný způsob deaktivace. Popsaný je v návodu u SIM karty.
- Nyní vyjměte SIM kartu z telefonu a vložte do Birth Alarm Lite 2.0 (viz. 4.3).



Nikdy neprogramujte vlastní číslo SIM karty na M1 nebo pozici v paměti karty!

7 Programování telefonních čísel

7.1 Režim pro programování

Při přímém programování Birth Alarm Lite 2.0 postupujte následovně:

Zadní konec šroubováku přiblížte na **několik sekund** k jedné z kontrolky provozu. Během této doby se kontrolka nejdříve 3 krát rozsvítí zeleně a potom modře. Když kontrolka svítí modře, můžete dát šroubovák pryč. Birth Alarm Lite 2.0 je nyní v režimu programování.

7.2 Programování telefonních čísel

Programování telefonních čísel lze provést 3 způsoby. Jmenovitě zavoláním, pomocí SMS nebo přímým naprogramováním. Všechny možnosti jsou detailně popsány níže. **Nicméně Vám stačí vybrat pouze 1 metodu.** Nejoblíbenější metodou je zavolání. Birth Alarm Lite 2.0 má 2 možná čísla pro volání označena jmény "M1", "M2".

7.2.1 Programování zavoláním

- Nastavte Birth Alarm Lite 2.0 do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky nebudou střídavě blikat 1x zeleně 1x modře.
- Nyní můžete zavolat Birth Alarm Lite 2.0. Přednostně z Vašeho mobilního telefonu.
- Birth Alarm Lite 2.0 nyní přijme vaše volání a naprogramuje vaše telefonní číslo do své paměti.
- Jako potvrzení vám Birth Alarm Lite 2.0 nyní zavolá zpátky. Nechte telefon zvonit, neodpovídejte a hovor neodmítejte.



Programování je nyní ukončeno. Birth Alarm Lite 2.0 nyní zná vaše telefonní číslo a zavolá Vám až kobyla začne rodit. Nyní počkejte 2 – 3 minuty. Birth Alarm Lite 2.0 automaticky ukončí režim programování a je připraven k použití.

Pokud byste si chtěli předprogramovat více telefonních čísel, pokračujte prosím následovně.

- Počkejte dokud Birth Alarm Lite 2.0 neblíká 1x modře a 2x zeleně.
- Nyní můžete zavolat Birth Alarm Lite 2.0 z telefonu, na který chcete být vyrozuměn na 2. místě (může to být i pevná telefonní linka).
- Birth Alarm Lite 2.0 nyní přijme vaše volání a uloží telefonní číslo do své paměti.
- Jako potvrzení vám Birth Alarm Lite 2.0 nyní zavolá zpátky. Nechte telefon zvonit a nereagujte.

vzor blikání provozních kontrolky	Stav
  	modul je připraven na první číslo
  	modul je připraven na druhé číslo



Počet zelených bliknutí na Birth Alarm Lite 2.0 oznamuje, které číslo se programuje.
Například 1x modré a zelené 2x bliknutí značí programování 2. čísla.

7.2.2 Programování pomocí SMS

Birth Alarm Lite 2.0 můžete programovat zasláním SMS. Postupujte prosím následovně:
Pošlete SMS zprávu z vašeho mobilního telefonu ve tvaru: "M1:" (Pozor! Použijte velké M)
okamžitě následované požadovaným prvním číslem. Tabulka ukazuje příklady SMS zprávy v různých zemích.

Country	Country code	Example of your mobile number:	Voorbeeld van de op te stellen SMS:
(Note: use capital "M" and type everything together without spaces)			
Netherlands (NL)	+31	0 6 12345678	M1:+31612345678
Belgium (BE)	+32	0 491 123456	M1:+32491123456
France(FR)	+33	0 6 12345678	M1:+33612345678
Switzerland (CH)	+41	0 176 12345678	M1:+4117612345678
Austria (AT)	+43	0 664 1234567	M1:+436641234567
England (UK)	+44	0 7788 123456	M1:+447788123456
Sweden (CH)	+46	0 707 123456	M1:+46707123456
Germany (DE)	+49	0 171 1234567	M1:+491711234567



Jak vidíte na příkladu, je třeba použít mezinárodní předvolbu na začátku telefonního čísla.

- Nastavte Birth Alarm Lite 2.0 do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky provozu nebudou blikat střídavě 1x modrá – 1x zelená
- Nyní odešlete připravenou SMS na mobilní číslo Birth Alarm Lite 2.0.
- Za krátký okamžik obdržíte informační SMS zprávu od Birth Alarm Lite 2.0 jako potvrzení. Toto bude obsahovat číslo, které jste si naprogramovali za M1:

- Samozřejmě můžete stejným způsobem naprogramovat čísla pro M2, M3 a M4. Můžete programovat také několik čísel v jedné SMS najednou. Pro každé číslo použijte nový řádek v programovací SMS




Pokud chcete vymazat číslo pomocí SMS, jednoduše odešlete odpovídající označení místa v paměti bez čísla telefonu za ním.



Důrazně doporučujeme jako první naprogramovat číslo mobilního telefonu pro M1. Tak může Birth Alarm Lite 2.0 posílat SMS zprávy a přijímat SMS zprávy od Vás.



Pomocí SMS můžete také programovat čísla v průběhu testování detektoru porodu. (viz. 10) Zatímco kontrolka NET na Birth Alarm Lite 2.0 klidně bliká (dlouhá zelená s krátkým přerušením), můžete odeslat SMS s telefonními čísly nebo novým nastavením a Birth Alarm Lite 2.0 je může zpracovat.

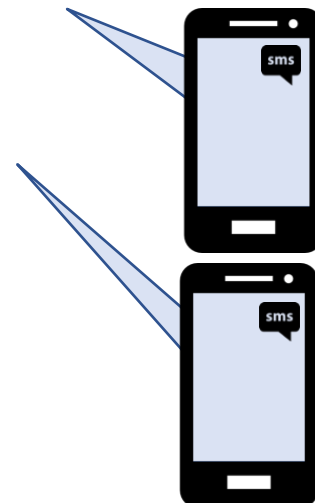


7.2.3 Přímé programování

Vždy existuje možnost programovat Birth Alarm Lite 2.0 dočasným vložením SIM karty použité v Birth Alarm Lite 2.0 do jiného telefonu a naprogramovat čísla prostřednictvím tohoto telefonu. Toto je obvykle mnohem komplexnější řešení. Pro přímé programování SIM karty postupujte takto:

- Vložte SIM kartu Alarmu do jiného telefonu.
- Zapněte telefon.



Pokud neuspějete při programování čísel na paměťových místech SIM karty 11, 12, 13 a 14 prostřednictvím telefonu, můžete také vložit SIM kartu do Birth Alarm Lite 2.0 a otevřít režim programování. Birth Alarm Lite 2.0 zjistí, že SIM karta není nakonfigurována a naprogramuje paměť na správná místa, abyste SIM kartu mohli použít.

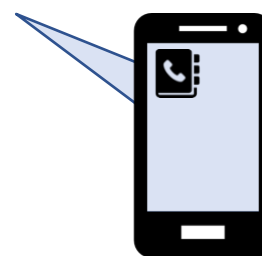

8. Režim spánku

Režim spánku tohoto Birth Alarm Lite 2.0 byste měli používat u vysokobřezích koby, které jsou zvyklé odpočívat (spát) plně natažené na boku. Režim spánku vyžaduje provedení určitého nastavení ve funkcích Birth Alarm Lite 2.0. Toto nastavení zajistí, aby nebyl vyhlášen alarm v situaci, kdy klisna ulehne k odpočinku na bok. Když používáte režim spánku, Birth Alarm Lite 2.0 bude kontrolovat, zda klisna leží plně na boku a zároveň je neklidná, což je v případě kontrakcí. Režim spánku zapnete následovně:

- Vytvořte SMS zprávu na svém mobilu ve tvaru: "**SL:1**" (Pozn.: použijte velká písmena **SL**)
- Přepněte Birth Alarm Lite 2.0 do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Lite 2.0 .
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Lite 2.0 SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**SL:1**" na posledním řádku jako oznámení o tom, že režim spánku je zapnutý.

Podobně můžete vždy režim spánku vypnout:

- Vytvořte SMS zprávu na svém mobilu ve tvaru: "**SL:0**" (Pozn.: použijte velká písmena **SL**)
- Přepněte Birth Alarm Lite 2.0 do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Lite 2.0.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Lite 2.0 SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**SL:0**" na posledním řádku jako oznámení o tom, že režim spánku je vypnutý. Birth Alarm Lite 2.0 nyní opět pracuje v běžném režimu.

9. SMS zpráva o stavu zařízení

Birth Alarm Lite 2.0 odešle zprávu o stavu zařízení pokud jste změnili nastavení nebo telefonní číslo v paměti Birth Alarm Lite 2.0 nebo pokud jste dostali hlášení o porodu. Tato SMS zpráva o stavu zařízení Vám poskytne informace o aktuálním nastavení a naprogramovaných telefonních číslech v Birth Alarm Lite 2.0. Zároveň poskytne některé měřené údaje ve vztahu ke klisně a vlastnímu Birth Alarm Lite 2.0.

Měřené hodnoty	SMS-zpráva: Battery 60 %	obsah: zbývající kapacita baterie
Programmová nastavení	Signal 51% M1: +31612345678 M2: +31644332211 SL:0	Síla signálu První číslo pro volání druhé číslo pro volání Režim spánku je vypnutý (0)

- *Když uvidíte, že procento kapacity baterií poklesne pod 20%, musíte baterie vyměnit!*
- *Když pozorujete, že síla signálu je nižší než 20%, doporučujeme zvolit jiného poskytovatele, který má lepší pokrytí signálem v místě, kde používáte Birth Alarm Lite 2.0.*



“M1” znamená “Paměť 1”.



“SL” označuje “Režim spánku”.

10. Testování

Předtím, než začnete používat Birth Alarm Lite 2.0, je důležité otestovat, zda správně funguje. Testování zvládnete jednoduše sami.

- Doporučujeme vzít Birth Alarm Lite 2.0 do místa, kde se nachází kobyla.
- Vezměte Birth Alarm Lite 2.0 do rukou a zapněte ho. Kontrolky budou blikat zeleně jednou každé 4 sekundy.
- Nyní otočte Birth Alarm Lite 2.0 o 90 stupňů, takže úzká strana směřuje nahoru.
(Pozor: Pokud používáte režim spánku, Birth Alarm Lite 2.0 je třeba znovu vrátit do horizontální polohy během 15 sekund)
- Kontrolka bude nyní blikat oranžově.
- Po několika sekundách se kontrolka zbarví modře a začne se navazovat spojení.
- Během krátké doby zavolá Birth Alarm Lite 2.0 na číslo uložené v paměti jako "M1".
- Hovor nepřijímejte ani neodmítejte pomocí červeného tlačítka na telefonu. Nechte telefon jenom zvonit.
- Birth Alarm Lite 2.0 přestane automaticky po několika sekundách volat.

Birth Alarm Lite 2.0 můžete nyní jednoduše vypnout pomocí zpětného volání. Birth Alarm Lite 2.0 hovor odmítne, ale nyní jste vypnuli Birth Alarm Lite 2.0. Birth Alarm Lite 2.0 už nebude dále volat na další čísla, pokud ho znovu nenakloníte poté, co byl několik minut pod kritickým úhlem.

Pokud při testu vše fungovalo, Birth Alarm Lite 2.0 je připraven pro použití na vaší kobyle.



Pokud přetrvává problém, postupujte podle tabulky Řešení závad.



Číslo SIM karty vašeho Birth Alarm Lite 2.0 si můžete uložit do svého mobilního telefonu pod vlastním jménem jako "kobyla" nebo "porod. Takto ihned rozeznáte mezi dalšími telefonními čísly na displeji telefonu volání z Birth Alarm Lite 2.0 a tím pádem nemusíte hovor přijímat.



Když obdržíte volání z Birth Alarm Lite 2.0 - bez rozdílu, zda je to oznámení nebo během programování – nikdy hovor Birth Alarm Lite 2.0 nepřijímejte. Když hovor přijmete, technicky máte s Birth Alarm Lite 2.0 hovor, který stojí zbytečné peníze! Hovor take neodmítejte (pomocí červeného tlačítka), protože Birth Alarm Lite 2.0 může být přesměrován do hlasové schránky.


11 Upevnění Birth Alarmu na kobyly

Při použití Birth Alarm Lite 2.0 m v ochranném rámu nebo na dolní části ohlávky je třeba ho upevnit do dodaného držáku následujícím způsobem:

- Opatrně nasuňte Birth Alarm Lite 2.0 do držáku, jak je ukázáno na obrázcích dole.
- Zkontrolujte, že kontrolky provozu jsou viditelné.
- Nakonec klop uzavřete pomocí dodané spony.



Na příkladu jsou kontrolky provozu umístěny ve směru uzavírací spony, ale můžete zařízení umístit i opačně. Na provoz alarmu to nemá vliv.

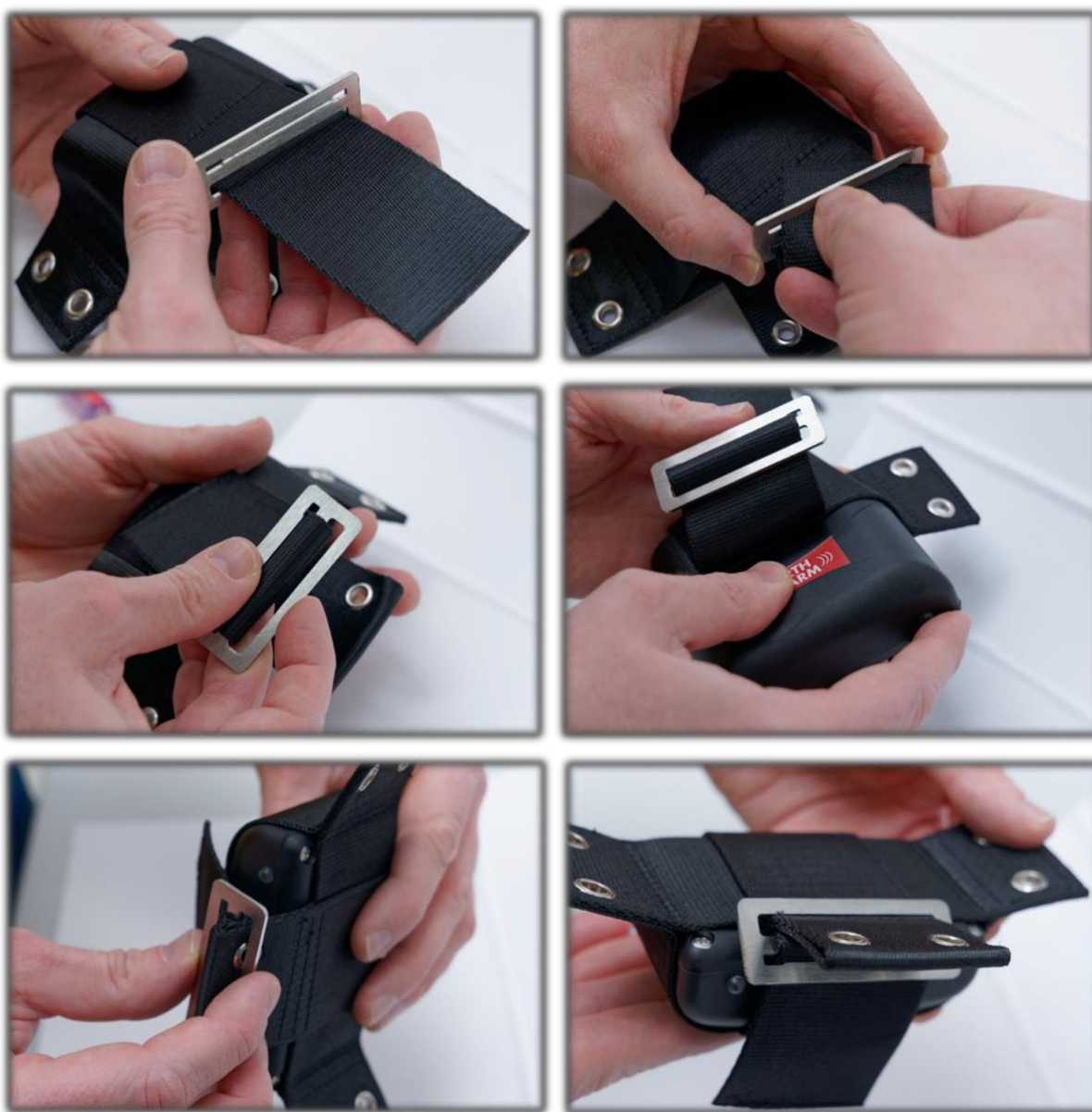

11.2 Umístění Birth Alarmu pod ohlávku

Pokud chcete použít Birth Alarm Lite 2.0 na spodní straně ohlávky, upevněte ji podle obrázku pomocí 3 stahovacích pásek. Zkontrolujte, že ohlávka je dostatečně pevně utažená, aby Birth Alarm Lite 2.0 visel přímo pod koňskou hlavou.



11.3 Umístění Birth Alarmu do ochranného rámu

Když používáte Birth Alarm Lite 2.0 v ochranném rámu, musíte upevnit držák s Birth Alarm Lite 2.0 stejně jako na obrázku. Použijte 6 ks stahovací pásky pro zajištění zařízení v ochranném rámu. Zkontrolujte, že alarm je pevně umístěn v horizontální poloze ve vztahu ke hřbetu kobyly.



12 Závěr a režimy použití

Níže je stručný popis, jak Birth Alarm Lite 2.0 funguje a jak by se měl používat. Doporučujeme přečtení tohoto textu.

Birth Alarm Lite 2.0 kontroluje pozici kobyly jednou za 4 sekundy. V určitých intervalech se Alarm Lite 2.0 bude přepínat do pohotovostního stavu, který šetří spotřebu energie a baterie nebudou přetíženy.

Když u kobyly začnou kontrakce, a proto si lehne do polohy plně na boku, Birth Alarm Lite 2.0 zavolá na váš mobilní telefon. Na displeji telefonu uvidíte číslo SIM karty Birth Alarm Lite 2.0. Pokud si uložíte toto číslo do seznamu telefonu pod určitým jménem, např. "Birth Alarm" nebo "kobyly", tak se toto jméno zobrazí rovněž na displeji telefonu. Nyní víte, že Vás volá Birth Alarm Lite 2.0. Narozdíl od běžných zvyklostí v tomto případě hovor **nepřijmete!** Výsledkem nepřijetí volání nedojde k "hovoru" a tím pádem je upozornění zcela zdarma. Birth Alarm Lite 2.0 automaticky přestane volat po několika sekundách. Nyní můžete provolat zpět Birth Alarm Lite 2.0, což je rovněž zdarma. Tímto prozvoněním jste dali Birth Alarm Lite 2.0 vědět, že jste volání zaznamenali a zařízení Vám přestane volat. Birth Alarm Lite 2.0 začne být znovu aktivní pouze v případě, že kůň znovu ulehne po uplynutí určitého času.

Pokud neprozvoníte Birth Alarm Lite 2.0 zpátky během půl minuty, Birth Alarm Lite 2.0 zavolá na druhé číslo uložené v paměti – pokud druhé číslo bylo naprogramováno – a poté počká další půl minuty na potvrzení. Birth Alarm Lite 2.0 může například upozornit celkem 2 telefonní čísla/osoby v případě začátku porodu. Pokud Birth Alarm Lite 2.0 postupně jednou zavolá každé číslo a z žádného číslo neobdrží zpětné prozvonění, Birth Alarm Lite 2.0 zavolá znovu první číslo. Poté Birth Alarm Lite 2.0 automaticky odešle SMS zprávu o stavu zařízení. V této SMS zprávě Birth Alarm Lite 2.0 stručně a jednoduše předá základní důležité informace o úhlu ulehnutí, kapacitě baterií, pokrytí signálem apod. **(viz. 9)**

Je rovněž třeba poznamenat, že Birth Alarm Lite 2.0 může také bez problémů zavolat na pevnou linku, kterou máte doma. Pokud má telefon na pevné lince rozpoznání volajícího, dopředu tak můžete zjistit, že Vám volá Birth Alarm Lite 2.0. Pokud nemáte telefon na pevné lince s identifikací volajícího, budete muset přijmout každý hovor. Pokud uslyšíte specifický zvuk, můžete ho určit jako volání Birth Alarm Lite 2.0. V tomto případě dojde k navázání spojení s Birth Alarm Lite 2.0 a malá částka peněz bude odečtena z předplacené karty použité v Birth Alarm Lite 2.0. Pokud chcete používat Birth Alarm Lite 2.0 tímto způsobem, doporučujeme pravidelně kontrolovat stav kreditu. Ujistěte se, že tam máte kredit vždy alespoň 200,- Kč.

Sada alkalických baterií bude obvykle napájet systém po dobu alespoň jednoho měsíce. Použití levných zinko-uhíkových baterií nebo dobíjecích baterií zásadně nedoporučujeme!

13 Technical data

Napájecí napětí	4,5V (3xAA Alkaline)
Spotřeba proudu	200uA průměr (1,3A špička)
LTE Modul	LTE FDD B1/B8/B7/B8/B20/B28 WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8
Paměť	2
Režim spánku	ANO
Typ oznámení	volání / SMS

Záruka: Až 2 roky od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na případy poškození polámaním, poškození vodou a / nebo jiné poškození. **Výrobce a dovozce nejsou zodpovědní za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s použitím Birth Alarm Lite 2.0. Dodávka a další aktivity probíhají v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Gallagher Europe B.V.**

Gallagher Europe B.V. (NL)
Bornholmstraat 62A
9723 AZ GRONINGEN
Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55
E-mail: info.nl@gallagh ereurope.com








Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE)
Oude Baan 14
3945 HAM
Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21
E-mail: info.be@gallagh ereurope.com



Gallagher Europe (DE)
Talstrasse 7
49479 Ibbenbüren
Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33
E-mail: info.de@gallagh ereurope.com



<p>Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve 91940 LES ULIS Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701 E-mail: info.fr@gallaghereurope.com</p>	
<p>Gallagher Europe (AT) Hopfgarten 18 8741 Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921 E-mail: info.at@gallaghereurope.com</p>	
<p>Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse 499 9015 St. Gallen Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60 E-mail: info@gallagherschweiz.ch</p>	
<p>Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545 E-mail: info.uk@gallaghereurope.com</p>	
<p>Gallagher Sweden AB (SE) Rönnaviksgatan 13 213 74 MALMÖ Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88 E-post: info@gallagher.se</p>	

Zastoupení pro Českou Republiku:

AGROTRANS spol. s r.o. Vítkovice v Krkonoších
Horní Sytová 101
512 41 Víchová and Jizerou
Tel. +420 739660878
Email: info@agrotrans.cz

