

**((BIRTH
ALARM))**

the original product

Birth Alarm Premium

Návod k obsluze



Děkujeme za nákup Birth Alarm Premium. Je to extrémně spolehlivý systém pro indikaci začátku porodu. Doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod před použitím, správným sestavením a správným provozem.

Obsah

1.	Úvod.....	4
2.	Obsah dodávky	4
3.	Příprava k použití.....	5
3.1	První použití.....	5
3.2	Zapnutí/vypnutí	6
4.	Provoz Birth Alarm Premium.....	7
4.1	Vložení/výměna baterií.....	7
4.2	Kryt Birth Alarm Premium	8
4.3	Instalace SIM karty.....	9
5.	Kontrolky (LED) Birth Alarm Premium.....	10
5.1	Kontrolky stavu	10
5.2	LTE kontrolky.....	11
6.	Vložení nové SIM karty	12
6.1	Volba SIM karty	12
6.2	Příprava SIM karty (obecně).....	12
6.2.1	Předplacená SIM karta/předplacený kredit	12
6.2.2	Karta na smlouvu, Internet/datové karty.....	12
6.3	Příprava SIM karty.....	13
7.	Programování telefonních čísel	14
7.1	Režim programování	14
7.2	Programování telefonních čísel	14
7.2.1	Programování voláním	14
7.2.2	Programování pomocí SMS	15
7.2.3	Přímé programování	16
8.	Programování dalších nastavení	17
8.1	Režim spánku.....	17
8.2	Nastavení úhlu.....	17
8.3	Počet volání a termín odeslání SMS	18
8.3.1	Změna počtu volání	18
8.3.2	Nastavení termínu odeslání SMS moment.....	18
8.4	Reset do továrního nastavení	19
9.	SMS zpráva o stavu zařízení	20
10.	Testování	21
11.	Upevnění Birth Alarm na koně	22
11.2	Upevnění Birth Alarmu na ohlávku	23
11.3	Upevnění Birth Alarmu do ochranného rámu.....	23
12.	Závěr a režimy použití.....	24
13.	Technická data	25

1. Úvod

Když Vaše klisna rodí, chtěli byste být u toho, abyste mohli pomoci v případě potřeby nebo informovat veterináře. Koně a poníci obvykle rodí v poloze na pravém nebo levém boku. Tato poloha jim dává více prostoru během kontrakcí. Birth Alarm Premium dobře využívá tento zvyk. Jednoduchým upevněním Birth Alarm Premium na spodní část ohlávky (nebo do ochranného rámu na hřbet klisny) se vám dostane upozornění, když začne porod.

2. Obsah dodávky

1. **Indikátor porodu Birth Alarm Premium.**
2. **Speciální pouzdro.** (Pouzdro, ve kterém je vložen Birth Alarm Premium.) Pouzdro lze upevnit na spodní část ohlávky nebo na hřbet klisny do ochranného rámu, který brání poškození zařízení při přetočení klisny přes hřbet.
3. **Kabelové pásky.** Abyste hned mohli začít, doplnili jsme do balení několik kabelových pásek (občas označované jako zdrčpásky). Tyto pásky jsou určeny na jedno použití, ale lze je běžně zakoupit.
4. **Speciální šroubovák.** Ten slouží k uvolnění šroubů na Birth Alarm Premium (např. při výměně vybitých baterií nebo vyjmutí SIM karty). Na konci šroubováku je silný magnet. Ten Vám umožní ovládat Birth Alarm Premium.
5. **USB kabel.** Ten potřebujete – nebo podobný – pro aktualizaci systémového software.
6. **SIM karta - adaptér.** V této sadě naleznete několik velikostí držáků, do kterých můžete umístit vaši SIM kartu. Ne nezbytně tuto sadu využijete, ale může se hodit, když budete chtít nastavit SIM kartu ve vašem mobilním telefonu a velikost SIM karty zrovna nebude souhlasit v obou zařízeních.
7. **Dokumentace.** Obsahem jsou 2 typy dokumentů pro Birth Alarm Premium:
 - a. **QuickStart Guide** (krátký manuál)
 - b. **Řešení závad** postup kontroly při řešení závady Birth Alarm Premium




3. Příprava k použití

3.1 První použití

Pokud chcete použít Birth Alarm Premium poprvé, musíte provést následující kroky pouze jednou:

- Odšroubujte kryt Birth Alarm Premium a odstraňte červenou přelepku, která je umístěna mezi kontakty jedné baterie. Všechny kontakty baterií jsou nyní spojeny a napájí energii Birth Alarm Premium.
- Vložte SIM kartu. SIM karta není součástí dodávky, ale snadno ji koupíte v nejbližším obchodě.
- V kapitole "Instalace nové SIM karty" (**viz. 6**) je vysvětleno, jak nastavit a instalovat nově zakoupenou SIM kartu.
- Jakmile jste dokončili tyto kroky u vašeho Birth Alarm Premium, můžete kryt opět uzavřít a pokračovat v nastavení. Při nasazení krytu zkontrolujte, aby světelné vodiče byly umístěny nad kontrolkami provozu (**viz. 4.2**)

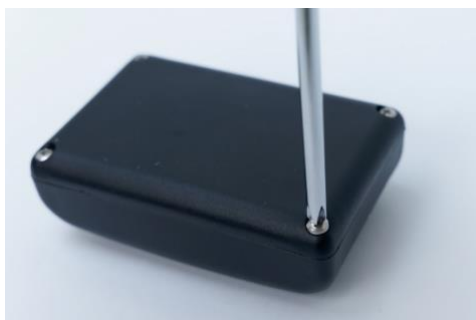

odšroubovat



odstranění přelepky



Pokud máte dobrý příjem signálu mobilního telefonu ve stáji nebo pastvině, kde se klisna nachází, doporučujeme zakoupit SIM kartu stejného poskytovatele mobilních služeb.



V některých zemích mohou platit jistá omezení s ohledem na použití SIM karet v automatických mobilních systémech (M2M). Dotazem u vašeho poskytovatele zjistíte, zda tato omezení platí v tomto případě.

3.2 Zapnutí/vypnutí

Birth Alarm Premium můžete zapnout /vypnout (on/off) a provozovat pomocí konce dodaného speciálního šroubováku. Na jedné z dlouhých stran krytu najdete 2 kontrolky.

Birth Alarm Premium zapnete (**ON**) následujícím způsobem:

- Přiblížte konec speciálního šroubováku k jedné z kontrolky (je jedno ke které)
- Birth Alarm Premium se nyní zapne. To je potvrzeno rozsvícením obou kontrolky zeleně.
- Nyní můžete konec šroubováku dát pryč.
- Váš Birth Alarm Premium je nyní zapnutý. Kontrolky se krátce rozsvítí zeleně každých cca 5 sekund jako potvrzení, že Birth Alarm Premium je zapnutý a funkční.



Birth Alarm Premium vypnete (OFF) takto:


- Přiblížte konec speciálního šroubováku k jedné z kontrolky (je jedno ke které)
- Birth Alarm Premium se nyní vypne.
- Nyní můžete konec šroubováku dát pryč.
- Váš Birth Alarm Premium je nyní vypnutý. Kontrolky jsou tmavé.



4 Provoz Birth Alarm Premium


Zde je uvedený přehled komponentů

1. Baterie.
2. 2 LED kontrolky
3. Slot pro SIM kartu
4. USB-konektor (aktualizace software)
5. LTE kontrolky
 - 5.1 "NET" – led
 - 5.2 "RING" – led
 - 5.3 "LTE" – led

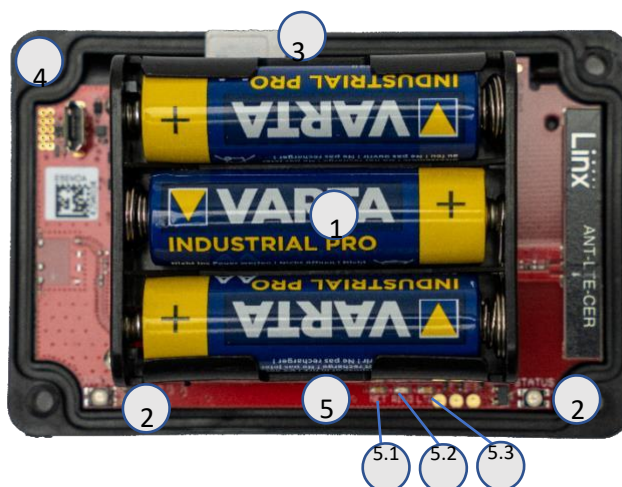

4.1 Vložení/výměna baterií

Když vyměňujete baterie v Birth Alarm Premium, měli byste vždy používat alkalické baterie (přednostně "Duracell", "Panasonic" nebo "Varta"). Používání dobíjecích baterií nedoporučujeme. Vždy vyměňte naráz všechny 3 baterie. Pokud nemůžete vyjmout baterie pouze prsty, použijte malý šroubovák, ale počínejte si opatrně. Baterie musí být vždy vložena tak, aby negativní (-) pól byl na přítlačné pružině.

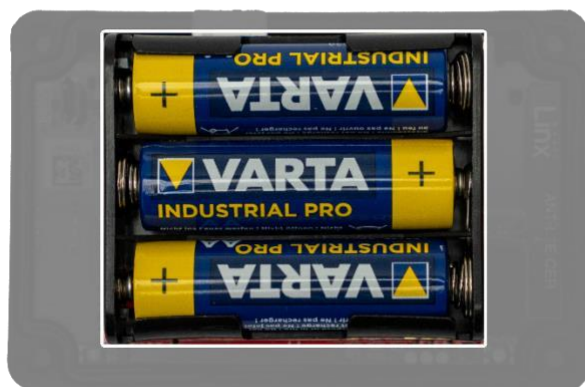


Na začátku sezóny porodů vždy použijte nové baterie!



Pokud neplánujete použít Birth Alarm Premium delší dobu, stejně jako po skončení sezóny porodů, měli byste baterie vyjmout. Je to prevence proti vytečení baterií a poškození vašeho Birth Alarm Premium.


4.2 Kryt Birth Alarm Premium

Kryt Birth Alarm Premium lze sešroubovat pouze jedním způsobem. Kryty kontrolky na dlouhé straně víka musí být and kontrolkami, když obě části k sobě šroubujete.

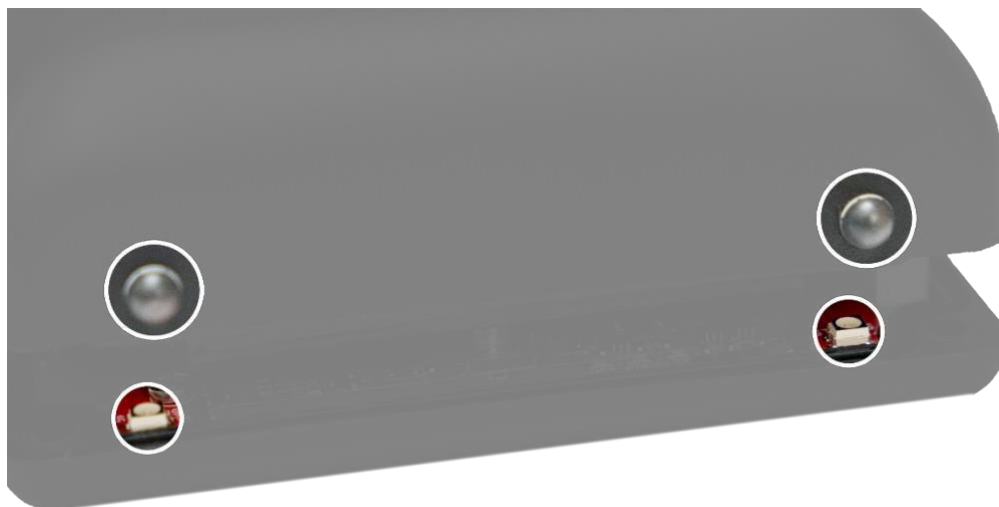


4.3 Vložení SIM karty

Birth Alarm Premium pracuje s micro-sim. Moderní SIM karty se dodávají v lámacím rámečku, ze kterého můžete vylomit micro SIM formát. Jako micro-sim formát je obvykle považuje druhý nejmenší formát s rozměry 12 x 15 mm.

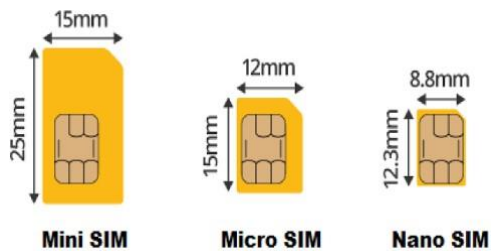

SIM karta se vkládá do Birth Alarm čipem na dolní straně. Pozor také na seříznutý roh SIM karty. Ten musí směřovat při vkládání SIM karty směrem dopředu. Zatlačte SIM kartu do otvoru až uslyšíte “kliknutí”. Potom kartu uvolněte. Nyní je SIM karta ve slotu a Birth Alarm Premium je připraven k použití. Když chcete SIM kartu ze slotu vyjmout, lehce na kartu zatlačte, až uslyšíte další “kliknutí”. Když nyní tlak uvolníte, SIM karta se posune směrem kupředu a snadno ji tak můžete vyjmout.

(Více informací o SIM kartě najdete v kapitole 6)

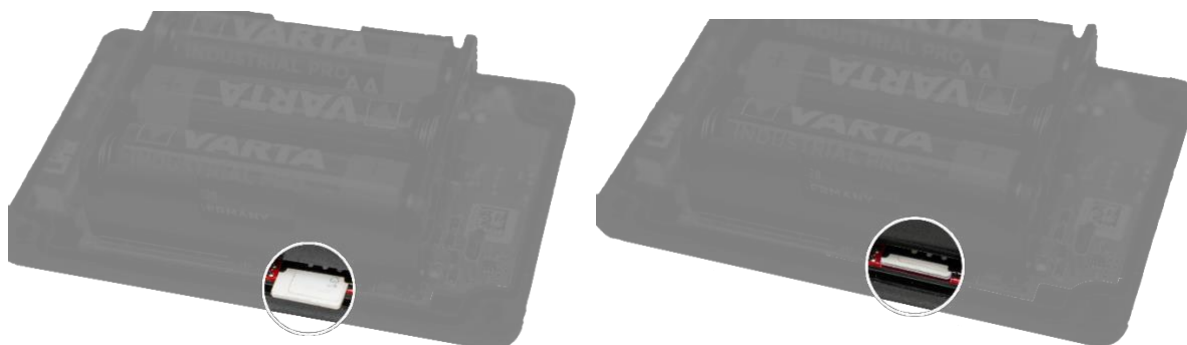

5 Birth Alarm Premium (Led) kontrolky

Pro kontrolu funkce Birth Alarm Premium slouží 2 provozní kontrolky a dále má Birth Alarm Premium 3 malé kontrolky uvnitř, které se ale vztahují pouze k vnitřními LTE modulu.

5.1 Kontrolky provozu

Kontrolky provozu jsou umístěné na dlouhé straně krytu. Tyto kontrolky pracují shodně. Dvojitá verze slouží pouze k tomu, aby byla kontrola stavu kobyly vždy přístupná z obou stran.



V tabulce jsou znázorněny možné kombinace barev, které se mohou na Birth Alarm Premium zobrazit.

barva / varianta	Stav
● ● ●	připraven, baterie OK
● ● ● ● ● ●	připraven, baterie OK, režim spánku zapnutý
● ● ● ● ● ●	připraven, slabá baterie
● ● ● ● ● ●	LTE/GSM aktivní, připojuje se
● ● ● ● ● ●	LTE/GSM aktivní, nedostatečný příjem sítě
● ● ● ● ● ●	LTE/GSM aktivní, příjem sítě průměrný
● ● ● ● ● ●	LTE/GSM aktivní, příjem sítě dobrý

5.2 LTE kontrolky

LTE kontrolky jsou vidět pouze po otevření krytu Birth Alarm Premium. Za běžných podmínek nepotřebujete vidět tyto kontrolky, ale může to být užitečné, když se objeví problém s připojením mobilu a je třeba kontaktovat servis.



V tabulce jsou uvedeny možné variant vzorů blikání a jejich význam:

Označení	v z o r	Stav
NET		Modul se připojuje k síti
NET		Modul je k síti připojen
NET		Modul vytáčí číslo
RING		Modul přijímá volání
LTE		Modul je vypnutý

6 Instalace nové SIM karty

SIM karta není součástí dodávky. Musíte si ji zakoupit sami.

6.1 Výběr SIM karty

Kupte si předplacenou SIM kartu nebo nebo take datovou kartu nebo kartu se smlouvou u vašeho dodavatele mobilních služeb. Přednostně vybírejte operátora, o kterém víte, že v místě plánovaného použití Birth Alarm Premium má dobré pokrytí signálem. Obvykle je předplacená karty nejsnadnějším řešením. Nicméně je možné, že existují omezení pro použití SIM karty v automatickém mobilním zařízení (M2M), která zakazují použití běžných mobilních čísel. Prověřte, zda se podobné omezení uplatňuje i ve vaší zemi.



Například v Holandsku není povoleno používat předplacené karty z běžných telefonů pro automatizované systémy volání. Kontaktujte svého poskytovatele ohledně vhodného řešení nebo jděte na www.birthalarm.com.

6.2 Příprava SIM karty (všeobecně)

Když zakoupíte novou SIM kartu, musíte ji nejdříve aktivovat. To lze provést následovně:

- Vložte novou kartu do svého mobilu.
- Pokud bude telefon vyžadovat PIN po zapnutí, vložte ho. PIN je uveden na obalu SIM karty. V mnoha případech je PIN kód nastaven na "0000". **Nyní musíte deaktivovat tuto ochranu SIM karty pomocí PIN kódu. Váš telefon nesmí po zapnutí vyžadovat vložení PIN kódu u této SIM karty. Postup deaktivace najdete v návodu telefonu, kde je popsáno, jak to provést.**

6.2.1 Předplacená SIM karta a předplacený kredit na volání

Když používáte předplacenou SIM kartu, je třeba sledovat stav kreditu. Při běžném použití volání a SMS zprávy vašeho Birth Alarm Premium jsou minimální, ale přesto pravidelně sledujte stav kreditu na předplacené SIM kartě. To zjistíte vložení této SIM karty do svého telefonu a zavoláním svému poskytovateli nebo posláním dotazovací SMS zprávy. Udržujte dostatečně vysoký kredit, aby vystačil na dostatečně dlouhé období. Dobití kreditu lze provést téměř kdekoliv.

6.2.2 SIM karta se smlouvou nebo datové/internetové karty

Když máte kartu/datovou kartu se smlouvou, zkontrolujte, že poskytovatel povolil funkci na hlasové a SMS služby na této kartě. Většinou tomu tak automaticky není u datových karet.

6.3 Příprava SIM karty

Jakmile jste nastavili svou SIM kartu je třeba učinit následující kroky:

- Nejméně jednou někomu zavolejte. Poskytovatel Vám pravděpodobně zašle uvítací zprávu. Počkejte na ni a vyčkejte, zda vámi volané číslo vyzvání.
- Nyní zkontrolujte, zda je zapnuta služba hlasové schránky na této kartě. To provedete zavoláním na číslo SIM karty z jiného telefonu. Pokud jste okamžitě spojeni do hlasové schránky, potom je tato služba u této karty aktivována.
V tomto případě byste tuto službu měli zrušit.
- Obvykle můžete deaktivovat službu hlasové schránky zavoláním na linku poskytovatele nebo vložení specifického deaktivčního kódu.
Každý poskytovatel používá jiný způsob deaktivace. Popsaný je v návodu u SIM karty.
- Nyní vyjměte SIM kartu z telefonu a vložte do Birth Alarm Premium (viz. 4.3).



Nikdy neprogramujte vlastní číslo SIM karty na M1 nebo pozici v paměti karty!

7 Programování telefonních čísel

7.1 Režim pro programování

Při přímém programování Birth Alarm Premium postupujte následovně:

Zadní konec šroubováku přiblížte na **několik sekund** k jedné z kontrolky provozu. Během této doby se kontrolka nejdříve 3 krát rozsvítí zeleně a potom modře. Když kontrolka svítí modře, můžete dát šroubovák pryč. Birth Alarm Premium je nyní v režimu programování.

7.2 Programování telefonních čísel

Programování telefonních čísel lze provést 3 způsoby. Jmenovitě zavoláním, pomocí SMS nebo přímým naprogramováním. Všechny možnosti jsou detailně popsány níže. **Nicméně Vám stačí vybrat pouze 1 metodu.** Nejoblíbenější metodou je zavolání. Birth Alarm Premium má 4 možná čísla pro volání označena jmény "M1", "M2", "M3" a "M4".

7.2.1 Programování zavoláním

- Nastavte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky nebudou střídavě blikat 1x zeleně 1x modře.
- Nyní můžete zavolat Birth Alarm Premium. Přednostně z Vašeho mobilního telefonu.
- Birth Alarm Premium nyní přijme vaše volání a naprogramuje vaše telefonní číslo do své paměti.
- Jako potvrzení vám Birth Alarm Premium nyní zavolá zpátky. Nechte telefon zvonit, neodpovídejte a hovor neodmítejte.



Programování je nyní ukončeno. Birth Alarm Premium nyní zná vaše telefonní číslo a zavolá Vám až kobyla začne rodit. Nyní počkejte 2 – 3 minuty. Birth Alarm Premium automaticky ukončí režim programování a je připraven k použití.










Když ukončíte programování, počkejte 2-3 minuty. Birth Alarm Premium automaticky ukončí režim programování a vrátí se do normálu. Birth Alarm Premium je nyní zapnutý a připraven k novému použití. Režim programování můžete ukočit okamžitě přiložením konce šroubováku na jednu z kontrolky provozu.

Pokud byste si chtěli předprogramovat více telefonních čísel, pokračujte prosím následovně.

- Počkejte dokud Birth Alarm Premium neblíká 1x modře a 2x zeleně.
- Nyní můžete zavolat Birth Alarm Premium z telefonu, na který chcete být vyzvozněn na 2. místě (může to být i pevná telefonní linka).
- Birth Alarm Premium nyní přijme vaše volání a uloží telefonní číslo do své paměti.
- Jako potvrzení vám Birth Alarm Premium nyní zavolá zpátky. Nechte

- Po několika sekundách Birth Alarm Premium bude blikat 1x modře a 3x zeleně jako oznámení, že můžete programovat třetí číslo a později stejným způsobem čtvrté číslo.

Vzor blikání provozních kontrollek	Stav
  	modul je připraven na první číslo
  	modul je připraven na druhé číslo
 	modul je připraven na třetí číslo
  	modul je připraven na čtvrté číslo



Počet zelených bliknutí na Birth Alarm Premium oznamuje, které číslo se programuje. Například 1x modré a zelené 4x bliknutí značí programování 4. čísla.

7.2.2 Programování pomocí SMS

Birth Alarm Premium můžete programovat zasláním SMS. Postupujte prosím následovně: Pošlete SMS zprávu z vašeho mobilního telefonu ve tvaru: "**M1:**" (Pozor! Použijte velké **M**) okamžitě následované požadovaným prvním číslem. Tabulka ukazuje příklady SMS zprávy v různých zemích.

Země	předvolba	Příklad čísla mobilního telefonu:	Vzor SMS zprávy SMS:
(Pozn.: použijte velké "M" a vše napište bez mezer)			
Netherlands (NL)	+31	0 6 12345678	M1:+31612345678
Belgium (BE)	+32	0 491 123456	M1:+32491123456
France (FR)	+33	0 6 12345678	M1:+33612345678
Switzerland (CH)	+41	0 176 12345678	M1:+4117612345678
Austria (AT)	+43	0 664 1234567	M1:+436641234567
England (UK)	+44	0 7788 123456	M1:+447788123456
Sweden (SE)	+46	0 707 123456	M1:+46707123456
Germany (DE)	+49	0 171 1234567	M1:+491711234567



Jak vidíte na příkladu, je třeba použít mezinárodní předvolbu na začátku telefonního čísla.

- Nastavte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (viz. 7.1). Počkejte dokud kontrolky provozu nebudou blikat střídavě 1x modrá – 1x zelená.

- Nyní odešlete připravenou SMS na mobilní číslo Birth Alarm Premium.
- Za krátký okamžik obdržíte informační SMS zprávu od Birth Alarm Premium jako potvrzení. Toto bude obsahovat číslo, které jste si naprogramovali za M1:
- Samozřejmě můžete stejným způsobem naprogramovat čísla pro M2, M3 a M4. Můžete programovat také několik čísel v jedné SMS najednou. Pro každé číslo použijte nový řádek v programovací SMS.




Pokud chcete vymazat číslo pomocí SMS, jednoduše odešlete odpovídající označení místa v paměti bez čísla telefonu za ním.



Důrazně doporučujeme jako první naprogramovat číslo mobilního telefonu pro M1. Tak může Birth Alarm Premium posílat SMS zprávy a přijímat SMS zprávy od Vás.



Pomocí SMS můžete také programovat čísla v průběhu testování detektoru porodu. (viz. 10) Zatímco kontrolka NET na Birth Alarm Premium klidně bliká (dlouhá zelená s krátkým přerušením), můžete odeslat SMS s telefonními čísly nebo novým nastavením a Birth Alarm Premium je může zpracovat.

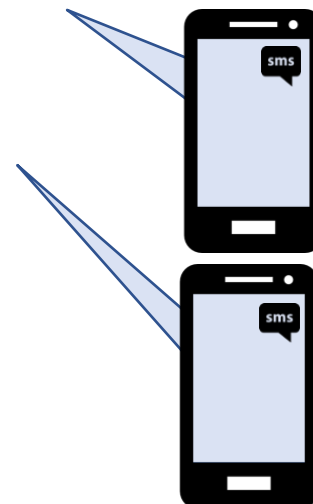


7.2.3 Přímé programování

Vždy existuje možnost programovat Birth Alarm Premium dočasným vložením SIM karty použité v Birth Alarm Premium do jiného telefonu a naprogramovat čísla prostřednictvím tohoto telefonu. Toto je obvykle mnohem komplexnější řešení. Pro přímé programování SIM karty postupujte takto:

- Vložte SIM kartu Alarmu do jiného telefonu.
- Zapněte telefon.



Pokud neuspějete při programování čísel na paměťových místech SIM karty 11, 12, 13 a 14 prostřednictvím telefonu, můžete také vložit SIM kartu do Birth Alarm Premium a otevřít režim programování. Birth Alarm Premium zjistí, že SIM karta není nakonfigurována a naprogramuje paměť na správná místa, abyste SIM kartu mohli použít.

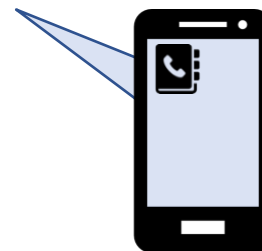

8. Programování dalších nastavení

Birth Alarm Premium je z výroby nastaven se standardními parametry. Obvykle budou dostatečné pro většinu všech klisen (koní / pony). Pokud ovšem chcete, můžete tato nastavení změnit.

8.1 Režim spánku

Režim spánku tohoto Birth Alarm Premium byste měli používat u vysokobřezích koby, které jsou zvyklé odpočívat (spát) plně natažené na boku. Režim spánku vyžaduje provedení určitého nastavení ve funkcích Birth Alarm Premium. Toto nastavení zajistí, aby nebyl vyhlášen alarm v situaci, kdy klisna ulehne k odpočinku na bok. Když používáte režim spánku, Birth Alarm Premium bude kontrolovat, zda klisna leží plně na boku a zároveň je neklidná, což je v případě kontrakcí. Režim spánku zapnete následovně:

- Vytvořte SMS zprávu na svém mobilu ve tvaru: "**SL:1**" (Pozn.: použijte velká písmena **SL**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**SL:1**" na posledním řádku jako oznámení o tom, že režim spánku je zapnutý.

Podobně můžete vždy režim spánku vypnout:

- Vytvořte SMS zprávu na svém mobilu ve tvaru: "**SL:0**" (Pozn.: použijte velká písmena **SL**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**SL:0**" na posledním řádku jako oznámení o tom, že režim spánku je vypnutý. Birth Alarm Premium nyní opět pracuje v běžném režimu.

8.2 Nastavení úhlu

Birth Alarm Premium reaguje na klisnu ležící s nataženýma nohama. jinými slovy "měří" do jaké míry leží klisna na boku. Obvykle úhel větší než 65° může být považován za abnormální a Birth Alarm Premium na to bude reagovat. Birth Alarm Premium je z výroby nastaven na 65°. Nicméně můžete hranici 65° sami upravit tak, aby Birth Alarm Premium začal reagovat později, tj. byl méně citlivý. Změnu nastavení úhlu (např. na 70°) provedete následovně:

- Vytvořte SMS zprávu na svém monilu ve tvaru: "**AN:70**" (Pozn.: použijte velká písmena **AN**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium mobile.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**AN:70**" na třetím řádku jako oznámení o tom, že úhel ulehnutí je nastaven na 70°.

Úhel detekce ulehnutí můžete nastavit v rozsahu 60° a 75°.



jako příklad – obdržíte alarmové SMS hlášení, že kobyła ulehla při 65°, ale nic se neděje. Můžete upravit detekční úhel trochu nahoru, např. na 70°. Nepřekračujte hodnotu 75 °!

8.3 Počet volání a termín odeslání SMS

Můžete si nastavit počet volání, kolikrát má Birth Alarm Premium zavolat a také termín, kdy se odešle SMS. Ve standardní nastavení Birth Alarm Premium provede 2 sady volání v případě vyhlášení alarmu. To znamená, že zavolá postupně na nastavená čísla M1, M2, M3 a M4 a potom tak učiní ještě jednou. V tomto momentě Birth Alarm Premium přestane automaticky volat.

Poté, co Birth Alarm Premium podruhé zavolá číslo M1, odešle na číslo M1 zprávu SMS o stavu zařízení. Pokud chcete, aby Birth Alarm Premium zavolal vícekrát nebo chcete odeslat SMS dříve nebo později, můžete sami provést změnu.

8.3.1 Změna počtu volání

Změnu počtu volání - např. na 5 cyklů – provedete takto:

- Vytvořte SMS zprávu na svém monilu ve tvaru: "**CL:5**" (Pozn.: použijte velká písmena **CL**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium mobile.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**CL:5**" na předposledním řádku jako oznámení o tom, že Birth Alarm Premium bude nyní volat v případě alarmu čísla uvedená v seznamu 5 krát, než se automaticky vypne.

8.3.2 Nastavení termínu odeslání SMS

Můžete si nastavit, zda vůbec a kdy chcete obdržet SMS zprávu o stavu zařízení.

8.3.2.1 Žádná SMS

Pokud si nepřejete dostávat SMS zprávy od Birth Alarm Premium, pokračujte prosím následovně:

- Vytvořte SMS zprávu na svém monilu ve tvaru: "**MS:0**" (Pozn.: použijte velká písmena **MS**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium mobile.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Zpráva obsahuje předposlední řádek, ale "**MS:0**" se nezobrazí

8.3.2.2 SMS vždy

Pokud si přejete obdržet SMS zprávu od Birth Alarm Premium při každém vyhlášení alarmu, postupujte takto:

- Vytvořte SMS zprávu na svém monilu ve tvaru: "**MS:1**" (Pozn.: použijte velká písmena **MS**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium mobile.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**MS:1**" na předposledním řádku jako oznámení o tom, že Birth Alarm Premium bude nyní posílat SMS zprávu o stavu zařízení po každém zavolání.


8.3.2.3 SMS po 2. volání

Pokud chcete obdržet SMS zprávu od Birth Alarm Premium při každém 2. zavolání (Birth Alarm Premium je takto nastaven z výroby), pokračujte následovně:

- Vytvořte SMS zprávu na svém monilu ve tvaru: "**MS:2**" (Pozn.: použijte velká písmena **MS**)
- Přepněte Birth Alarm Premium do "režimu programování" (**viz. 7.1**). Počkejte dokud kontrolky stavu neblíkají střídavě 1x modrá – 1x zelená.
- Nyní odešlete připravenou SMS na číslo Birth Alarm Premium mobile.
- Za krátký okamžik obdržíte jako potvrzení od Birth Alarm Premium SMS o stavu zařízení. Nyní se objeví "**MS:2**" na předposledním řádku jako oznámení o tom, že Birth Alarm Premium bude nyní posílat SMS zprávu o stavu zařízení po 2. zavolání.

8.4 Resetování do továrního nastavení

Všechna nastavení můžete resetovat do továrního nastavení odesláním textové zprávy "RESET" na číslo vašeho Birth Alarm Premium. Tím se hodnoty všech nastavení vrátí k hodnotám nastaveným z výroby. Uložená telefonní čísla budou nyní vymazána.

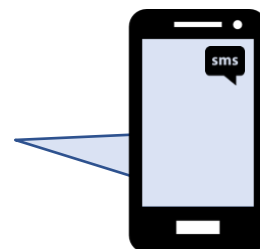

9. SMS zpráva o stavu zařízení

Birth Alarm Premium odešle zprávu o stavu zařízení pokud jste změnili nastavení nebo telefonní číslo v paměti Birth Alarm Premium nebo pokud jste dostali hlášení o porodu. Tato SMS zpráva o stavu zařízení Vám poskytne informace o aktuálním nastavení a naprogramových telefonních číslech v Birth Alarm Premium. Zároveň poskytne některé měřené údaje ve vztahu ke klisně a vlastnímu Birth Alarm Premium.

	SMS-zpráva:	obsah:
měřené	Battery 60 %	zbývající kapacita baterie
hodnoty	Signal 51%	síla signálu
	Angle: 65	měřený úhel ulehnutí ve stupních
	SMS: 12	počet již odeslaných SMS zpráv: 12
	M1: +31612345678	první číslo pro volání
	M2: +31644332211	druhé číslo pro volání
programová	M3:	třetí číslo (zde neuloženo)
	M4:	čtvrté číslo (zde neuloženo)
nastavení	AN:65	detekce úhlu ulehnutí nastavena na 65°
	MS:2 CL:2	SMS po 2. Zavolání, celkový počet cyklů volání je 2
	SL:0	režim spánku je vypnutý (0)

- Když uvidíte, že procento kapacity baterií poklesne pod 20%, musíte baterie vyměnit!
- Když pozorujete, že síla signálu je nižší než 20%, doporučujeme zvolit jiného poskytovatele, který má lepší pokrytí signálem v místě, kde používáte Birth Alarm Premium.
- Počítadlo SMS zpráv Vám poskytne představu o spotřebě kreditu na mobilním čísle zařízení.



“M1” znamená “Paměť 1”.



“AN” označuje “Úhel”.



“MS” znamená “Zpráva”.



“CL” značí “Volání”.



“SL” znamená “Režim spánku”.

10. Testování

Předtím, než začnete používat Birth Alarm Premium, je důležité otestovat, zda správně funguje. Testování zvládnete jednoduše sami.

- Doporučujeme vzít Birth Alarm Premium do místa, kde se nachází kobyla.
- Vezměte Birth Alarm Premium do rukou a zapněte ho. Kontrolky budou blikat zeleně jednou každé 4 sekundy.
- Nyní otočte Birth Alarm Premium o 90 stupňů, takže úzká strana směřuje nahoru.
(Pozor: Pokud používáte režim spánku, Birth Alarm Premium je třeba znovu vrátit do horizontální polohy během 15 sekund)
- Kontrolka bude nyní blikat oranžově.
- Po několika sekundách se kontrolka zbarví modře a začne se navazovat spojení.
- Během krátké doby zavolá Birth Alarm Premium na číslo uložené v paměti jako "M1".
- Hovor nepřijímejte ani neodmítejte pomocí červenéh otlačítka na telefonu. Nechte telefon jenom zvonit.
- Birth Alarm Premium přestane automaticky po několika sekundách volat.

Birth Alarm Premium můžete nyní jednoduše vypnout pomocí zpětného volání. Birth Alarm Premium hovor odmítne, ale nyní jste vypnuli Birth Alarm Premium. Birth Alarm Premium už nebude dále volat na další čísla, pokud ho znovu nenakloníte poté, co byl několik minut pod kritickým úhlem.

Pokud při testu vše fungovalo, Birth Alarm Premium je připraven pro použití na vaší kobyle.



Pokud přetrvává problém, postupujte podle tabulky Řešení závad.



Číslo SIM karty vašeho Birth Alarm Premium si můžete uložit do svého mobilního telefonu pod vlastním jménem jako "kobyla" nebo "porod. Takto ihned rozeznáte mezi dalšími telefonními čísly na displeji telefonu volání z Birth Alarm Premium a tím pádem nemusíte hovor přijímat.



Když obdržíte volání z Birth Alarm Premium - bez rozdílu, zda je to oznámení nebo během programování – nikdy hovor Birth Alarm Premium nepřijímejte. Když hovor přijmete, technicky máte s Birth Alarm Premium hovor, který stojí zbytečné peníze! Hovor take neodmítejte (pomocí červeného tlačítka), protože Birth Alarm Premium může být přesměrován do hlasové schránky.

11 Upevnění Birth Alarmu na kobyly

Při použití Birth Alarm Premium v ochranném rámu nebo na dolní části ohlávky je třeba ho upevnit do dodaného držáku následujícím způsobem:

- Opatrně nasuňte Birth Alarm Premium do držáku, jak je ukázáno na obrázcích dole.
- Zkontrolujte, že kontrolky provozu jsou viditelné.
- Nakonec klop uzavřete pomocí dodané spony.



Na příkladu jsou kontrolky provozu umístěny ve směru uzavírací spony, ale můžete zařízení umístit i opačně. Na provoz alarmu to nemá vliv.



11.2 Umístění Birth Alarmu pod ohlávku

Pokud chcete použít Birth Alarm Premium na spodní straně ohlávky, upevněte ji podle obrázku pomocí 3 stahovacích pásek. Zkontrolujte, že ohlávka je dostatečně pevně utažená, aby Birth Alarm Premium visel přímo pod koňskou hlavou.



11.3 Umístění Birth Alarmu do ochranného rámu

Když používáte Birth Alarm Premium v ochranném rámu, musíte upevnit držák s Birth Alarm Premium stejně jako na obrázku. Použijte 6 ks stahovací pásky pro zajištění zařízení v ochranném rámu. Zkontrolujte, že alarm je pevně umístěn v horizontální poloze ve vztahu ke hřbetu kobyly.



12 Závěr a režimy použití

Níže je stručný popis, jak Birth Alarm Premium funguje a jak by se měl používat. Doporučujeme přečtení tohoto textu.

Birth Alarm Premium kontroluje pozici kobyly jednou za 4 sekundy. V určitých intervalech se Alarm Premium bude přepínat do pohotovostního stavu, který šetří spotřebu energie a baterie nebudou přetíženy.

Když u kobyly začnou kontrakce, a proto si lehne do polohy plně na boku, Birth Alarm Premium zavolá na váš mobilní telefon. Na displeji telefonu uvidíte číslo SIM karty Birth Alarm Premium. Pokud si uložíte toto číslo do seznamu telefonu pod určitým jménem, např. "Birth Alarm" nebo "kobyly", tak se toto jméno zobrazí rovněž na displeji telefonu. Nyní víte, že Vás volá Birth Alarm Premium. Narozdíl od běžných zvyklostí v tomto případě hovor **nepřijmete!** Výsledkem nepřijetí volání nedojde k "hovoru" a tím pádem je upozornění zcela zdarma. Birth Alarm Premium automaticky přestane volat po několika sekundách. Nyní můžete provolat zpět Birth Alarm Premium, což je rovněž zdarma. Tímto prozvoněním jste dali Birth Alarm Premium vědět, že jste volání zaznamenali a zařízení Vám přestane volat. Birth Alarm Premium začne být znovu aktivní pouze v případě, že kůň znovu ulehne po uplynutí určitého času.

Pokud neprozvoníte Birth Alarm Premium zpátky během půl minuty, Birth Alarm Premium zavolá na druhé číslo uložené v paměti – pokud druhé číslo bylo naprogramováno – a poté počká další půl minuty na potvrzení. Birth Alarm Premium může například upozornit celkem 4 telefonní čísla/osoby v případě začátku porodu. Pokud Birth Alarm Premium postupně jednou zavolá každé číslo a z žádného číslo neobdrží zpětné prozvonění, Birth Alarm Premium zavolá znovu první číslo. Poté Birth Alarm Premium automaticky odešle SMS zprávu o stavu zařízení. V této SMS zprávě Birth Alarm Premium stručně a jednoduše předá základní důležité informace o úhlu ulehnutí, kapacitě baterií, pokrytí signálem apod. **(viz. 9)**

Je rovněž třeba poznamenat, že Birth Alarm Premium může také bez problémů zavolat na pevnou linku, kterou máte doma. Pokud má telefon na pevné lince rozpoznání volajícího, dopředu tak můžete zjistit, že Vám volá Birth Alarm Premium. Pokud nemáte telefon na pevné lince s identifikací volajícího, budete muset přijmout každý hovor. Pokud uslyšíte specifický zvuk, můžete ho určit jako volání Birth Alarm Premium. V tomto případě dojde k navázání spojení s Birth Alarm Premium a malá částka peněz bude odečtena z předplacené karty použité v Birth Alarm Premium. Pokud chcete používat Birth Alarm Premium tímto způsobem, doporučujeme pravidelně kontrolovat stav kreditu. Ujistěte se, že tam máte kredit vždy alespoň 200,- Kč.






Sada alkalických baterií bude obvykle napájet systém po dobu alespoň jednoho měsíce. Použití levných zinko-uhlíkových baterií nebo dobíjecích baterií zásadně nedoporučujeme!

13 Technická data

Napájecí napětí	4,5V (3xAA Alkaline)
Spotřeba proudu	200uA průměr (1,3A špička)
LTE Modul	LTE FDD B1/B8/B7/B8/B20/B28 WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8
Paměť	4
Režim spánku	ANO
Detekce úhlu ulehnutí	nastavitelná 65 -80°
Typ oznámení	volání / SMS

Záruka: Až 2 roky od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na případy poškození polámaním, poškození vodou a / nebo jiné poškození. **Výrobce a dovozce nejsou zodpovědni za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s použitím Birth Alarm Premium. Dodávka a další aktivity probíhají v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Gallagher Europe B.V.**

<p>Gallagher Europe B.V. (NL) Bornholmstraat 62A 9723 AZ GRONINGEN Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55 E-mail: info.nl@gallagh ereurope.com</p>	
<p>Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE) Oude Baan 14 3945 HAM Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21 E-mail: info.be@gallagh ereurope.com</p>	
<p>Gallagher Europe (DE) Talstrasse 7 49479 Ibbenbüren Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33 E-mail: info.de@gallagh ereurope.com</p>	

<p>Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve 91940 LES ULIS Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701 E-mail: info.fr@gallaghereurope.com</p>	
<p>Gallagher Europe (AT) Hopfgarten 18 8741 Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921 E-mail: info.at@gallaghereurope.com</p>	
<p>Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse 499 9015 St. Gallen Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60 E-mail: info@gallagherschweiz.ch</p>	
<p>Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545 E-mail: info.uk@gallaghereurope.com</p>	
<p>Gallagher Sweden AB (SE) Rönneviksgatan 13 213 74 MALMÖ Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88 E-post: info@gallagher.se</p>	

Zastoupení pro Českou Republiku:

AGROTRANS spol. s r.o. Vítkovice v Krkonoších
Horní Sytová 101
512 41 Víchová and Jizerou
Tel. +420 739660878
Email: info@agrotrans.cz

